


シャクヤク末中ペオニフロリンの測定

<測定条件>

カラム : J-Pak Supero C18 (4.6 mm I.D. × 150 mmL, 5 μm)
 検出 : UV-232 nm
 移動相 : 水/アセトニトリル/リン酸 (850/150/1)
 流量 : 1.0 mL/min
 カラム温度 : 20 °C
 測定試料 : シャクヤク末抽出物

<試料調製>

日本薬局方に準じ、メタノールを用いて抽出した。

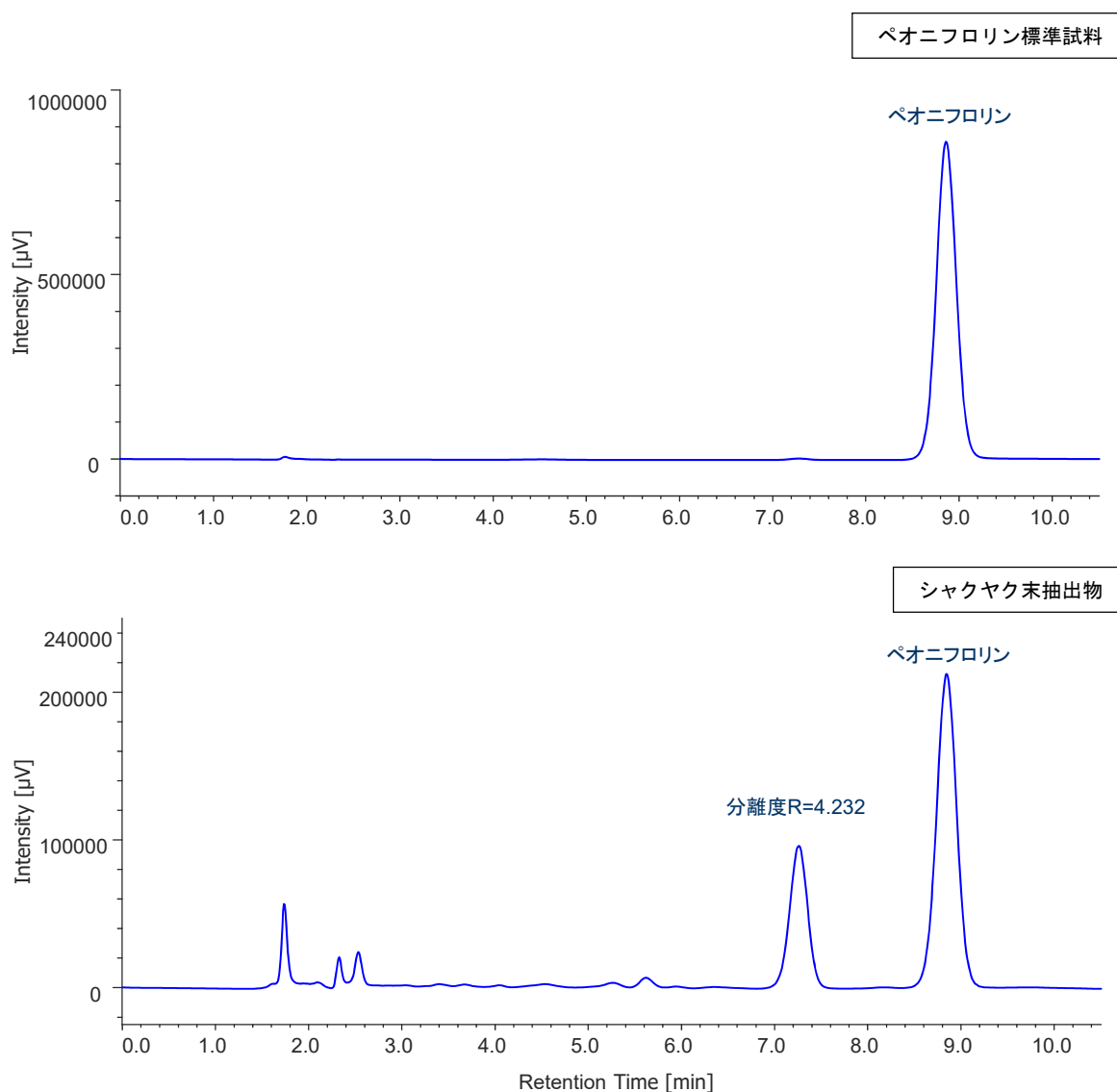

Keyword : 日本薬局方, JP17, Supero C18, C18カラム, UV検出器, シャクヤク末, ペオニフロリン