
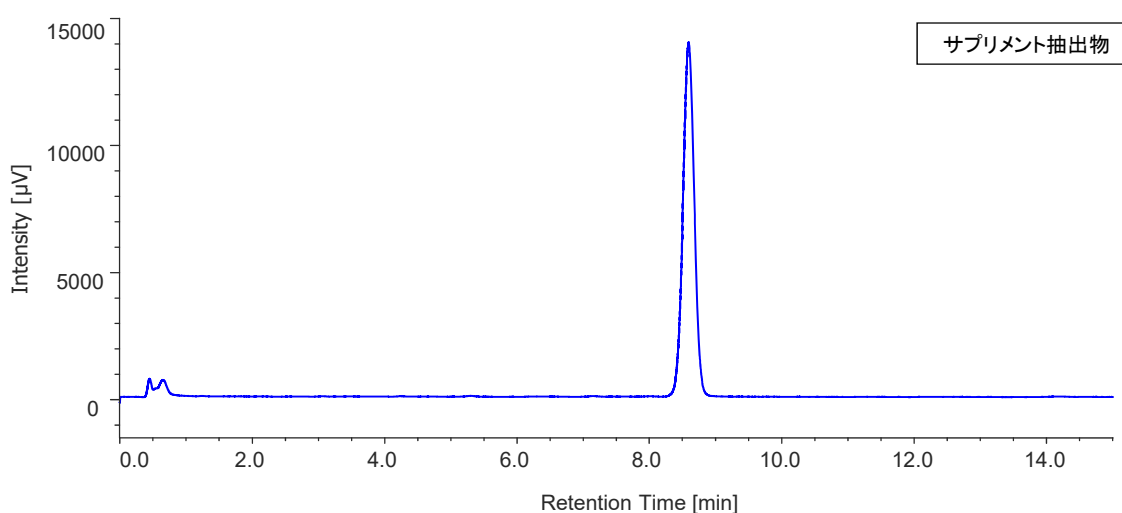


サプリメント中のユビキノン10の測定

<測定条件>

カラム1 : J-Pak Core C18 (4.6 mm I.D. × 75 mmL, 2.7 μm)
 検出 : UV-275 nm
 移動相 : アセトニトリル/テトラヒドロフラン (90/10)
 流量 : 1.8 mL/min
 カラム温度 : 40 °C
 測定試料 : ユビキノン標準試料、コエンザイムQ10サプリメント (市販品)

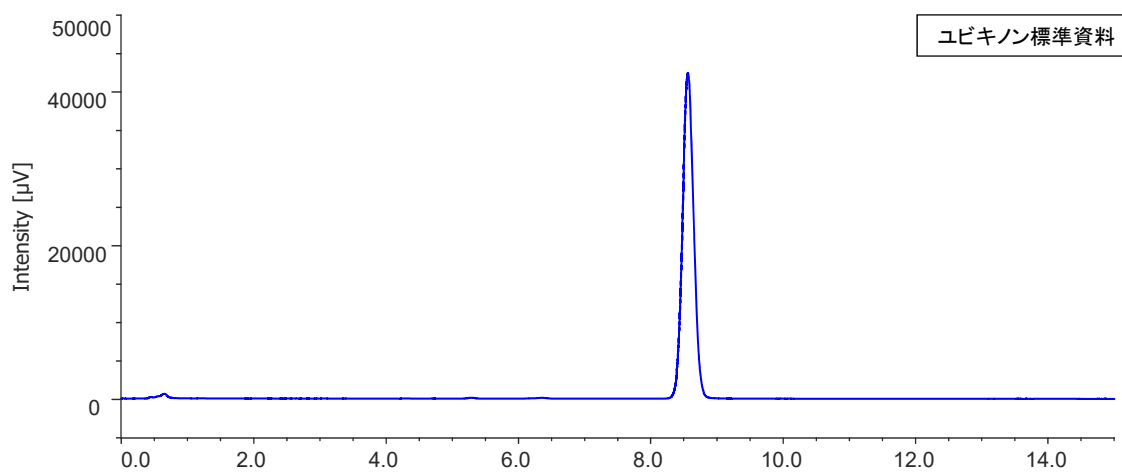

Keyword : Core C18, C18カラム, コアシェルカラム, UV検出器, ユビキノン, コエンザイムQ10